

Prikinstructie Ovitrelle®-pen

Ovitrelle® is een voorgevulde injectiepen voor éénmalig gebruik. Het bevat choriogonadotropine alfa, dit is een kunstmatig gemaakt hCG (zwangerschapshormoon).

Ovitrelle® is een grijs/groene pen en wordt geleverd met een injectienaald welke los verpakt is.

De volledige inhoud van de pen moet in één keer worden geïnjecteerd op het met uw arts afgesproken tijdstip. Bewaar de Ovitrelle®-pen, buiten bereik van kinderen, in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik dit product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de pen of doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Hoe bewaart u uw pen

- Bewaar de pen op een veilige plaats. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden!
- Gebruik dit product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de pen of doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer bewaren.
- Gebruik dit product niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn, als de vloeistof deeltjes bevat of niet helder is.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen die vaak voorkomen:

- Vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, braken, reacties op injectieplaats, milde OHSS.

Bijwerkingen die soms voorkomen:

- Depressie, irritatie, rusteloosheid, diarree, ernstige OHSS.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen:

- Lichte reversibele huidreacties, in de vorm van huiduitslag
- Bloedvataandoeningen
- Lichte tot ernstige overgevoeligheidsreacties inclusief anafylactische reacties en shock
- Trombo-embolie, gewoonlijk samenhangend met ernstige OHSS

Versie: 1	Aangemaakt door: admin	Aanmaakdatum: 15-5-2017	Gewijzigd door: admin	Wijzigingsdatum: 4-12-2017	Afdruk datum: 6-4-2018
Document eigenaar: Harold Mous	Document beheerder: Marja Nienhuis	Document type: Informatie	Document status: Gepubliceerd	Valide tot en met: 1-6-2019	Afdruk geldig tot: 7-4-2018

Heeft u vragen of bent u onzeker, schroom dan niet om Nij Barrahûs te bellen.


Telefoonnummer: **0561 - 61 00 30** - maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur

Voor dringende vragen zijn wij bereikbaar op ons spoednummer **06 - 17 43 69 16**

E-mail: info@nijbarrahus.nl

Klaarmaken van de injectie

Werk in een schone omgeving en zorg ervoor dat de naald steriel blijft. Raak de naald niet aan en leg hem alleen neer mét de beschermhuls op de naald.

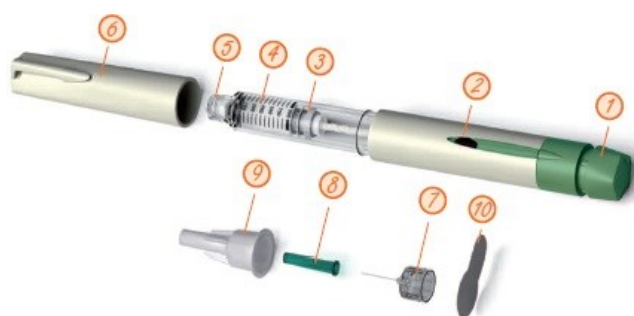

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 doseerknop | 5 naaldaansluiting met schroefdraad | 8 binnenbescherming naald |
| 2 dosisweergave | 6 dop van de pen | 9 buitendop naald |
| 3 plunjerzuiger | 7 verwijderbare naald | 10 lostrekbare verzegeling |
| 4 reservoirhouder | | |

1. Haal de dop van de pen.
2. Neem een nieuwe naald, die bij de Ovitrelle®- pen is meegeleverd.
3. Controleer of de lostrekbare verzegeling op de buitendop van de naald niet beschadigd is of los zit.
4. Trek de lostrekbare verzegeling van de dop af.
5. Houd de buitendop van de naald stevig vast.
6. Duw de tip van de pen, met schroefdraad, in de buitendop van de naald en schroef de buitendop van de naald erop, totdat hij stevig vast zit. **(Figuur a)**

Versie: 1	Aangemaakt door: admin	Aanmaakdatum: 15-5-2017	Gewijzigd door: admin	Wijzigingsdatum: 4-12-2017	Afdruk datum: 6-4-2018
Document eigenaar: Harold Mous	Document beheerder: Marja Nienhuis	Document type: Informatie	Document status: Gepubliceerd	Valide tot en met: 1-6-2019	Afdruk geldig tot: 7-4-2018



a.


7. Verwijder de buitendop van de naald door er voorzichtig aan te trekken. Laat de binnenbescherming van de naald op zijn plaats.
8. Gooi de buitendop van de naald niet weg; deze heeft u nog nodig om de naald na de injectie van de voorgevulde pen te verwijderen.

Een grote luchtbel verwijderen voor het eerste gebruik

Kijk zorgvuldig naar de reservoirhouder. Als u **geen** grote luchtbel ziet, is de voorgevulde pen klaar voor gebruik. Ga door naar stap **12**. In het andere geval gaat u verder met stap **9**.

9. Draai de doseerknop voorzichtig rechtsonder totdat u een stip (•) in de dosisweergave ziet staan. Als u deze positie voorbij bent gegaan, draait u de doseerknop gewoon **terug** tot aan de stip (•).

(figuur b)

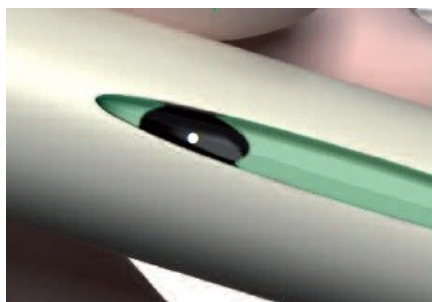

b.



c.

10. Verwijder vervolgens de binnenbescherming van de naald en houd de pen zo vast dat de naald

Versie: 1	Aangemaakt door: admin	Aanmaakdatum: 15-5-2017	Gewijzigd door: admin	Wijzigingsdatum: 4-12-2017	Afdruk datum: 6-4-2018
Document eigenaar: Harold Mous	Document beheerder: Marja Nienhuis	Document type: Informatie	Document status: Gepubliceerd	Valide tot en met: 1-6-2019	Afdruk geldig tot: 7-4-2018

naar boven wijst.


- 11.** Tik zacht met uw vinger tegen de reservoirhouder, zodat eventuele luchtbelletjes naar de naald omhoog stijgen. Laat de naald nog steeds omhoog wijzen en duw met uw duim de doseerknop zo ver mogelijk in.

Er moet een druppeltje vloeistof aan de punt van de naald verschijnen; dit laat zien dat de

Ovitrelle®-pen klaar is voor de injectie. **(figuur c)**

Als u geen vloeistof ziet, kunt u het een tweede keer proberen (u mag dit maximaal twee keer doen) en start u vanaf stap 9 van de hierboven vermelde rubriek “ Een grote luchtbel verwijderen”.

Het instellen van de dosis

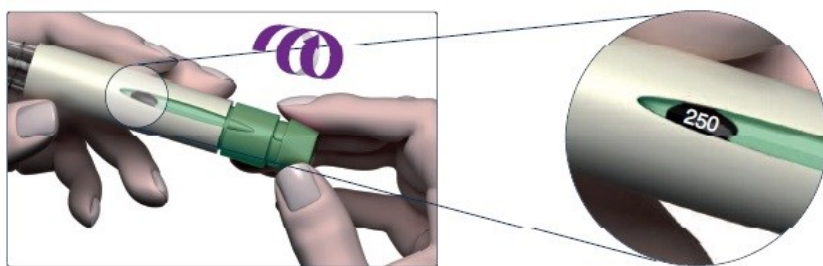

d.

- 12.** Draai de dosis-instellingsknop voorzichtig rechtsom. Duw of trek niet aan de doseerknop terwijl u eraan draait. Op de dosisweergave ziet u een rechte lijn en u moet blijven draaien totdat u het getal 250 kunt aflezen. **(figuur d)**

De dosis injecteren

- 13.** Bepaal de plaats waar u gaat injecteren. Kies een plek links of rechts onder uw navel.

- 14.** Desinfecteer desgewenst de huid met een alcoholdoekje. (Dit is niet strikt noodzakelijk)

Controleer opnieuw of in de dosisweergave het getal 250 zichtbaar is. Is dit niet het geval, draai de pen dan alsnog naar de juiste stand. (zie hierboven).

- 15.** Verwijder nu voorzichtig de binnenbescherming van de naald en gooi deze weg.

- 16.** Injecteer de dosis volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige.

Duw eerst de naald langzaam in de huid en duw vervolgens de doseerknop zo ver mogelijk in.

U moet de naald minimaal 10 seconden in de huid laten zitten, waarbij de doseerknop ingedrukt

moet blijven. **(figuur e)**

Versie: 1	Aangemaakt door: admin	Aanmaakdatum: 15-5-2017	Gewijzigd door: admin	Wijzigingsdatum: 4-12-2017	Afdruk datum: 6-4-2018
Document eigenaar: Harold Mous	Document beheerder: Marja Nienhuis	Document type: Informatie	Document status: Gepubliceerd	Valide tot en met: 1-6-2019	Afdruk geldig tot: 7-4-2018

Het getal dat de dosis aangeeft in de dosisweergave springt weer terug op 0. Dit geeft aan dat de volledige dosis is afgegeven.



Na 10 seconden blijft u de doseerknop ingedrukt houden en trekt u de naald uit de huid.

e.

17. Controleer of de dosisweergave **0** aangeeft. Dit bevestigt dat de dosis volledig is geïnjecteerd.


Indien de pen niet **0** aangeeft, bel dan met Nij Barrahûs.

18. Verwijder de naald van de pen:

Houd de Ovitrelle®- pen stevig aan de reservoirhouder vast.

Zet voorzichtig de buitendop van de naald weer op de naald. (figuur f)

Pak dan de buitendop van de naald vast en schroef de naald los – dit doet u door hem linksom te draaien. Zorg dat u zichzelf niet met de naald prikt.

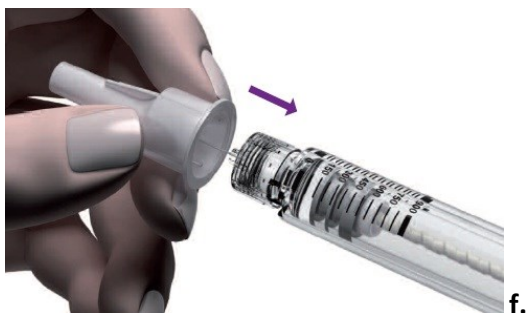

f.

Zet nu de dop weer op de pen. De lege pen mag met het huisvuil afgevoerd worden.

Gebruik naalden die al gebruikt zijn nooit opnieuw. Gooi de gebruikte naald **niet** bij het huisvuil, maar bewaar de naald in een stevige afsluitbare pot of naaldenbeker en lever deze in bij Nij Barrahûs of bij uw apotheek.

Versie: 1	Aangemaakt door: admin	Aanmaakdatum: 15-5-2017	Gewijzigd door: admin	Wijzigingsdatum: 4-12-2017	Afdruk datum: 6-4-2018
Document eigenaar: Harold Mous	Document beheerder: Marja Nienhuis	Document type: Informatie	Document status: Gepubliceerd	Valide tot en met: 1-6-2019	Afdruk geldig tot: 7-4-2018